



NUOVO
COLA LIME

VOCO Profluorid® Varnish

VERNICE DESENSIBILIZZANTE CON FLUORURO



VOCO Profluorid® Varnish

ALTAMENTE EFFICACE

Ipersensibilità

La sensibilità dentale è un problema diffuso che interessa un numero elevato di persone. Di solito, le ipersensibilità causano solo un dolore provvisorio che non viene detto sempre al dentista.


L'ipersensibilità è causata soprattutto dai tubuli dentinali esposti. Quindi, lo scopo del trattamento è quello di sigillare i tubuli.

Indicazioni

Profluorid Varnish è una vernice contenente fluoruro per il trattamento dell'ipersensibilità. I tubuli dentinali esposti a livello del colletto del dente o dopo una preparazione di cavità vengono sigillati in modo efficace.


Componenti ed effetto di VOCO Profluorid® Varnish

Profluorid Varnish è una vernice a base di colofonia contenente il 5 % di fluoruro di sodio (corrisponde a 22.600 ppm di fluoruro). Lo ione di fluoruro, insieme agli ioni calcio accumulati nei tubuli, causa una precipitazione di fluoruro di calcio che sigilla in modo efficace i tubuli. Secondo una ricerca effettuata tra gli utilizzatori, più dell' 85 % dei pazienti non sentivano più il dolore dopo un solo trattamento con Profluorid Varnish. Così come sigilla rapidamente i tubuli dentinali,

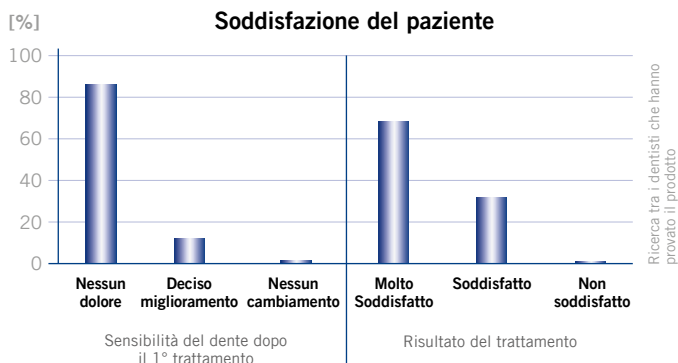

Profluorid Varnish fa anche in modo che il fluoruro di calcio formi dei depositi sulla superficie dei denti. Questi depositi proteggono il dente dagli attacchi degli acidi, promuovono la remineralizzazione e contribuiscono alla formazione a lungo termine di fluorapatite.

Alla vernice è stato aggiunto anche lo xilitolo che, oltre alle sue proprietà di miglioramento dell'aroma, ha anche un comprovato effetto cariostatico.

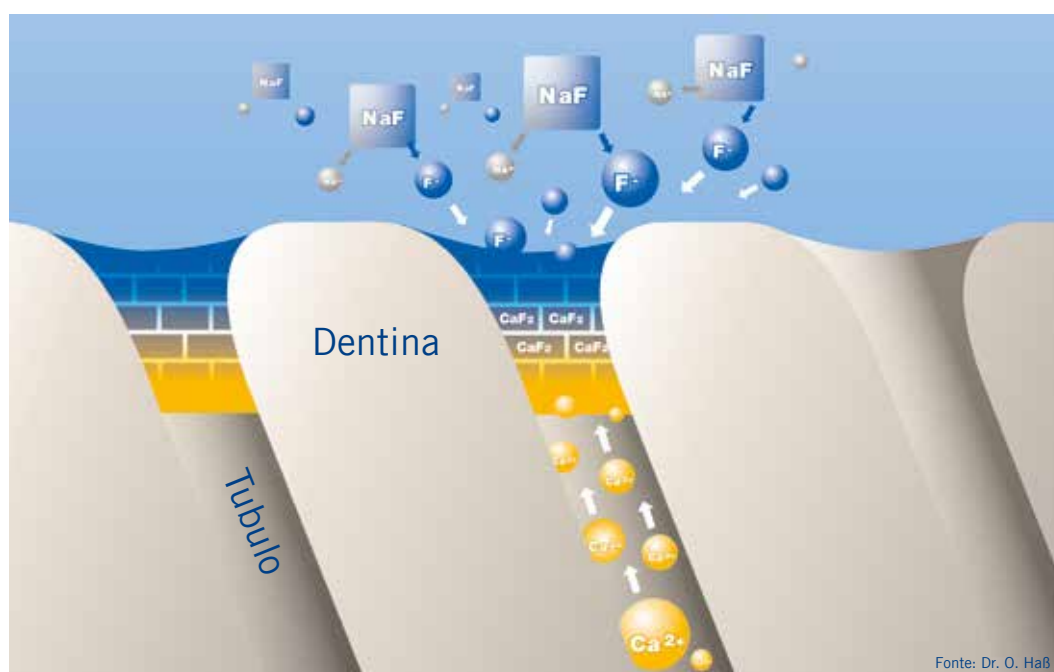

VOCO Profluorid® Varnish


SEMPLICE ED ESTETICO

Facile da applicare

Grazie alla sua matrice di colofonia, Profluorid Varnish aderisce bene anche sulle superficie umide. Non è necessario asciugare le superfici dei denti. Questo migliora la collaborazione dei pazienti con basso livello di compiacenza (come i bambini).

Estetica e aroma

Profluorid Varnish è una vernice dello stesso colore del dente che non influisce negativamente sull'estetica. Profluorid Varnish è disponibile in sei piacevoli sapori: Bubble gum e ciliegia soprattutto per bambini e pazienti giovani, menta come sapore classico soprattutto per adulti, caramello come variante cremosa, melone come sapore esotico e cola lime con la frizzantezza e l'aroma di frutta. Questi sei piacevoli aromi vi permetteranno di offrire un servizio ancora migliore e personalizzato per ciascun paziente.

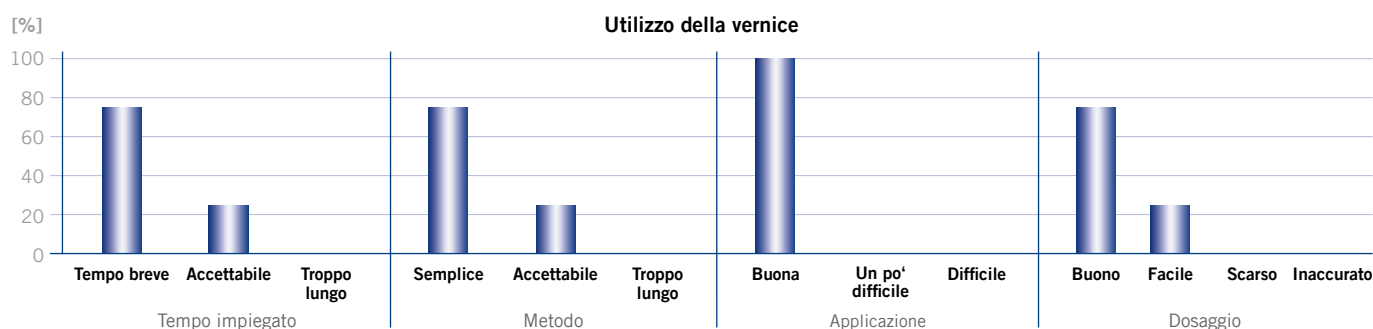

Ricerca tra i dentisti che hanno provato il prodotto

Opinione dei dentisti

Tutti i dentisti che utilizzano il prodotto hanno confermato le buone proprietà di lavorabilità ed estetica. La grande maggioranza ha segnalato anche differenze positive tra Profluorid Varnish e i prodotti concorrenti. Profluorid Varnish

è stato ugualmente ben accettato dai pazienti. Dopo il trattamento, quasi tutti i pazienti hanno affermato di non avere sintomi o che il livello di sensibilità era significativamente ridotto. Profluorid Varnish: molto più di un buon aroma!

Desensibilizzazione semplice ed estetica grazie a VOCO Profluorid® Varnish



I vantaggi della *SingleDose*

- Prodotto e applicatore in confezione igienica monouso
- Non servono ulteriori dispositivi
- Nessuna fuoriuscita in tutte le posizioni

Applicazione con la fiala cilindrica



I vantaggi della fiala cilindrica

- Uso multiplice grazie alle cannule monouso
- Applicazione precisa
- Applicazione interprossimale semplice
- Applicazione del fluoruro completa in un solo passo

VOCO Profluorid® Varnish

LA VOSTRA SCELTA

Indicazioni

Trattamento dell'ipersensibilità dentale

Trattamento di superfici radicolari sensibili

Vantaggi

- Tollera l'umidità
- Estetico, colore bianco trasparente simile al dente
- Desensibilizzazione rapida e continuo rilascio di fluoruro (5 % NaF $\triangleq$ 22.600 ppm fluoruro)
- Disponibile in sei piacevoli sapori: melone, menta, ciliegia, caramello, bubble gum & cola lime
- Applicabile in strati sottili e quindi si ottiene un'ottima resa
- Trattamento delle aree cervicali dopo la pulizia professionale e la rimozione di tartaro
- Ottimo in caso di ipomineralizzazione di incisivi e molari



Confezionamento

Sapore	SingleDose 48 x 0,40 ml	SingleDose 50 x 0,25 ml	SingleDose 50 x 0,40 ml	SingleDose 200 x 0,40 ml	Tubo 10 ml	Tubo 50 ml	Fiala cilindrica 5 x 1,70 ml
Melone	–	REF 1268	REF 1269	REF 1271	REF 1267	REF 1272	REF 2235
Caramello	–	–	REF 2226	REF 2229	REF 2232	–	–
Ciliegia	–	–	REF 2227	REF 2230	REF 2233	–	–
Menta	–	–	REF 2228	REF 2231	REF 2234	–	–
Bubble gum	–	–	REF 2238	REF 2239	–	–	–
Cola lime	–	–	REF 2240	REF 2241	REF 2236	–	–
Mixed	REF 2225*	–	–	–	REF 2971**	–	–

REF 2167 Cannule d'applicazione tipo 43 per fiala cilindrica, 100 pz.

*Mixed: 8 per ciascuno di melone, caramello, ciliegia, menta, bubble gum, cola lime **4 x 10 ml (melone, caramello, ciliegia, menta)

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germania

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.it

Disponibile presso: