

3M Science.
Applied to Life.™

3M Oral Care

**La soluzione 3M
per perni e monconi.
La complessità
divenuta semplice.**

La soluzione 3M per perni e monconi Con RelyX™ Fiber Post 3D.


Per risultati predicibili – in minor tempo.

Lo sappiamo: la procedura endodontica è molto complessa. Quindi, più la procedura per il restauro endodontico è semplice e affidabile e meglio è – sia per il dentista sia per il paziente. L'eccellente soluzione di 3M per perni e monconi è un grande passo in avanti in questa direzione: grazie a un numero significativamente inferiore di passaggi clinici e prodotti, vi permette di lavorare in modo più rapido, semplice ed efficiente.

Tutto ciò che vi serve in quattro passaggi.

La soluzione di 3M per perni e monconi non solo semplifica il vostro lavoro, ma vi aiuta anche a ottenere risultati affidabili e predicibili – dalla radice al moncone. Tutto ciò che vi serve è il nuovo RelyX™ Fiber Post 3D Glass Fiber Post più altri tre prodotti semplici da utilizzare di 3M Oral Care: RelyX™ Unicem 2 Automix Cement, Scotchbond™ Universal Adhesive e Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative.

Questi quattro prodotti – ciascuno dei quali studiato per rendere il vostro lavoro più affidabile ed efficiente – hanno un obiettivo comune: semplificare ciò che è complesso!

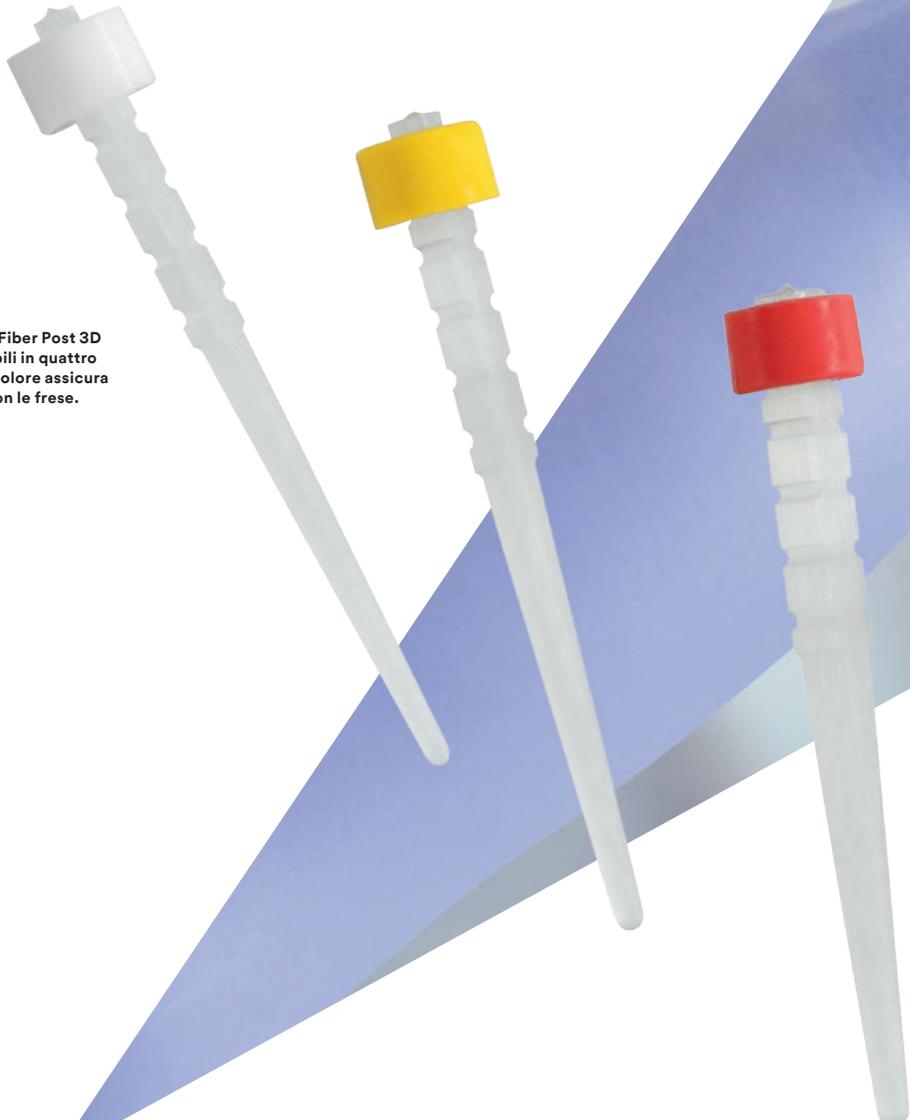


I perni in fibra di vetro RelyX™ Fiber Post 3D Glass Fiber Post sono disponibili in quattro diverse dimensioni. Il codice colore assicura una precisa corrispondenza con le frese.



Cinque dimensioni di frese
(compresa una fresa universale).

monconi. **Meno passaggi clinici, meno**

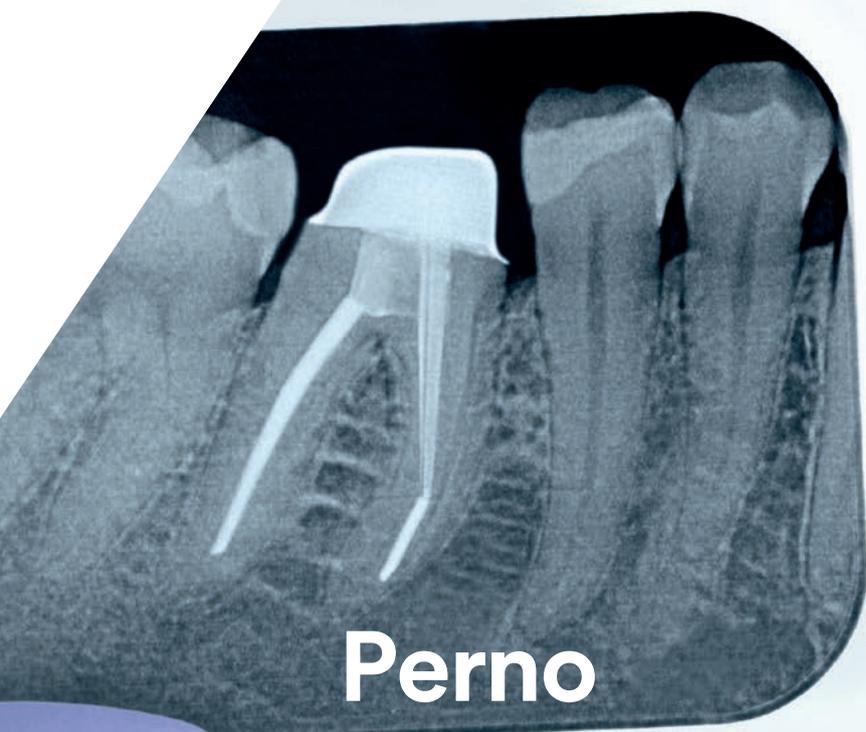

Perno

RelyX™ Fiber Post 3D Glass Fiber Post.
Con l'esclusivo design 3D per una sicurezza in più.

RelyX Fiber Post 3D si basa su 8 anni di successo clinico del comprovato prodotto RelyX Fiber Post. Ora, lo abbiamo ulteriormente migliorato per darvi ancora più sicurezza:

- Ritenzione meccanica superiore al materiale di ricostruzione del moncone grazie alle macroritenzioni 3D coronali.
- Forte adesione nel canale radicolare grazie alla sua superficie microporosa senza silanizzazione.
- Miglior controllo della posizione del perno grazie all'eccellente radiopacità.
- Minor rischio di frattura radicolare grazie all'elasticità simile a quella della dentina.
- Più estetico di un perno in metallo.

Cemento

RelyX™ Unicem 2 Automix.
Self-Adhesive Universal Resin Cement.




Il cemento RelyX™ Unicem 2 Automix non solo offre un'eccellente forza adesiva, ma permette anche di risparmiare tempo prezioso, in quanto non è necessario mordenzare, applicare il primer e l'adesivo.

La pratica siringa automiscelante, insieme alla punta endo, vi permette di applicare il cemento pronto all'uso direttamente nel canale radicolare, dal basso verso l'alto.

Con una sola applicazione – e virtualmente nessun vuoto.

o prodotti.

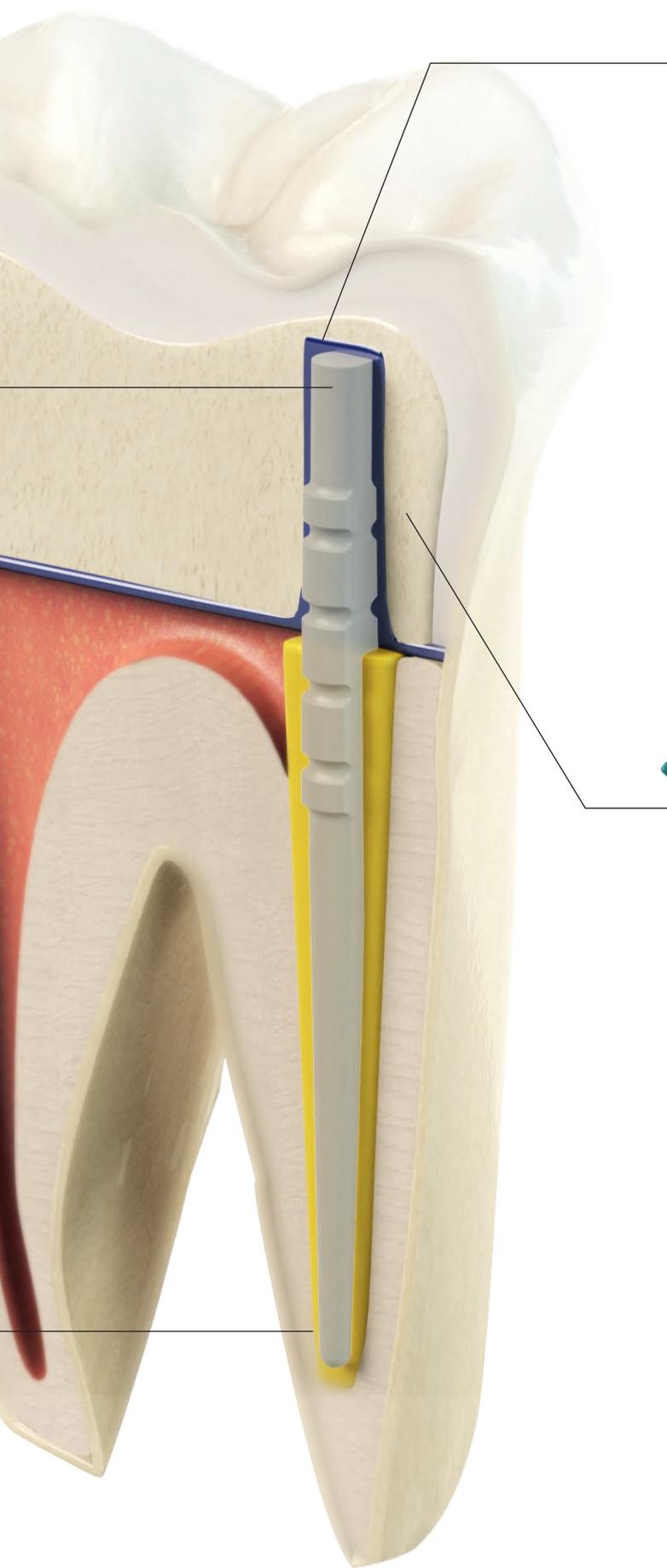

Adesivo

Scotchbond™ Universal Adhesive

L'adesivo Universale Scotchbond assicura un'adesione affidabile al materiale di ricostruzione del moncone e alla struttura del dente – senza necessità di un ulteriore primer.

Un'applicazione – fatto!



Ricostruzione del moncone

Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative

Le eccellenti caratteristiche fisiche e di lavorabilità rendono Filtek Bulk Fill Posterior Restorative il materiale d'elezione per la ricostruzione del moncone, soprattutto in caso di grandi cavità in combinazione con un perno: il nuovo design della capsula assicura un'applicazione senza vuoti. Il materiale è modellabile, ma anche facile da adattare alla struttura del dente e del perno. Inoltre, per una preparazione ancora più facile, il materiale polimerizzato può essere strumentato come la dentina. La ricostruzione del moncone può essere eseguita in modo più rapido e semplice.

Con una sola applicazione fino a 5 mm.

Cemento

Il cemento pronto all'uso RelyX™ Unicem 2 Automix può essere applicato direttamente nel canale radicolare con la punta endo.


CONSIGLIO CLINICO:

Raccomandiamo di utilizzare una 3M™ ESPE™ Retraction Capsule nei casi in cui sia necessaria la gestione dell'umidità durante il posizionamento del perno e la ricostruzione del moncone.




Perno

I perni RelyX™ Fiber Post 3D Glass Fiber Post vengono applicati nel canale radicolare. Non è necessario alcun pre-trattamento.

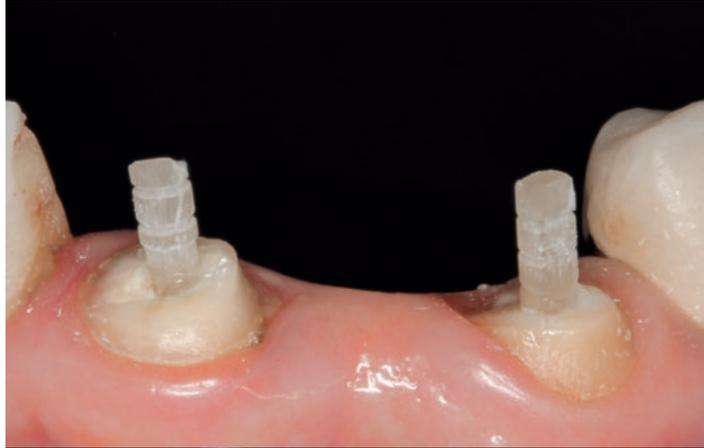


Adesivo

Si applica Scotchbond™ Universal Adhesive. Non è necessario alcun primer aggiuntivo.

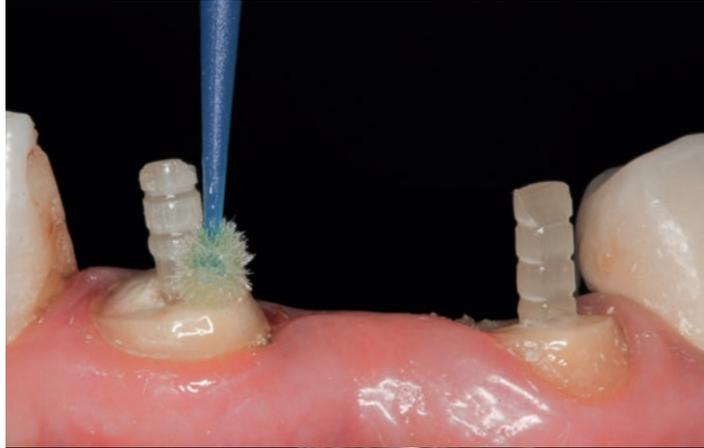

Ricostruzione del moncone

Il moncone viene ricostruito intorno al perno con Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative.

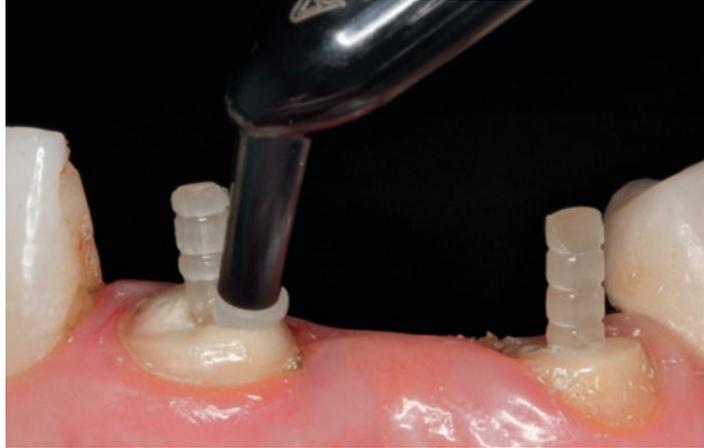

Perno e ricostruzione del moncone dopo la preparazione finale.



Informazioni per l'ordine

Codice	Informazioni sul prodotto
RelyX™ Fiber Post 3D Glass Fiber Post	
56957	Kit introduttivo 20 perni, dimensioni 0, 1, 2, 3 (5 perni per ciascuna dimensione), 5 frese, dimensioni 0, 1, 2, 3, Universal (1 fresa per ciascuna dimensione)
56958	Trial Kit con RelyX™ Unicem 2 Automix Cement 10 perni, dimensioni 1, 2 (5 perni per ciascuna dimensione), 3 frese, dimensioni 1, 2, Universal (1 fresa per ciascuna dimensione), 1 RelyX™ Unicem 2 Automix Syringe A2 – 8,5 g, 10 puntali di miscelazione, 10 punte endo
56960	Post and Core Build-up Kit con RelyX™ Unicem 2 Automix Cement 1 Trial Kit RelyX™ Fiber Post 3D/RelyX™ Unicem 2 Automix Cement, 20 capsule di Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative A3 - 0,2 g ciascuna, 1 flacone Scotchbond™ Universal Adhesive - 5 ml
Ricambi perni e frese	
56948	10 perni, dimensione 0 (1,1 mm dia), bianco
56949	10 perni, dimensione 1 (1,3 mm dia), giallo
56950	10 perni, dimensione 2 (1,6 mm dia), rosso
56951	10 perni, dimensione 3 (1,9 mm dia), blu
56873	1 fresa, dimensione 0 (1,1 mm dia), bianco
56864	1 fresa, dimensione 1 (1,3 mm dia), giallo
56865	1 fresa, dimensione 2 (1,6 mm dia), rosso
56866	1 fresa, dimensione 3 (1,9 mm dia), blu
56867	1 fresa Universal

RelyX™ Unicem 2 Automix Self-Adhesive Resin Cement	
Ricambi	
56846	Tinta A2 Universal 1 siringa - 8,5 g, 15 puntali di miscelazione (regular), 5 puntali di miscelazione (wide), 5 punte endo
56847	Tinta A3 Opaque 1 siringa - 8,5 g, 15 puntali di miscelazione (regular), 5 puntali di miscelazione (wide), 5 punte endo
56848	Tinta Traslucent 1 siringa - 8,5 g, 15 puntali di miscelazione (regular), 5 puntali di miscelazione (wide), 5 punte endo
Value Pack	
56849	Tinta A2 Universal 3 siringhe - 8,5 g, 30 puntali di miscelazione (regular), 20 puntali di miscelazione (wide), 15 punte endo, 5 punte intraorali
56857	Tinta A3 Opaque 3 siringhe - 8,5 g, 30 puntali di miscelazione (regular), 20 puntali di miscelazione (wide), 15 punte endo, 5 punte intraorali
56858	Tinta Traslucent 3 siringhe - 8,5 g, 30 puntali di miscelazione (regular), 20 puntali di miscelazione (wide), 15 punte endo, 5 punte intraorali
Accessori	
56851	30 puntali di miscelazione (regular)
56856	20 puntali di miscelazione (wide)
56855	15 punte endo
56852	15 punte intraorali

Codice	Informazioni sul prodotto
Scotchbond™ Universal Adhesive	
41254	Introductory Kit 1 flacone di Scotchbond™ Universal Adhesive - 5 ml, 50 vaschette di miscelazione monouso, 50 microbrush monouso, 1 siringa di mordenzante - 3 ml, 25 punte di dispensazione per siringa di mordenzante
41258	Ricambio 1 flacone di Scotchbond™ Universal Adhesive - 5 ml

Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative		
4864TK	Capsule Procedure Kit 40 capsule di A2 e A3 (20 capsule per ciascuna tinta) - 0,2 g ciascuna, 1 flacone Scotchbond™ Universal Adhesive - 5 ml, 10 Sof-Lex™ Spiral Finishing Wheels, 10 Sof-Lex™ Spiral Polishing Wheels, 1 mandrino RA	
4863TK	Syringe Procedure Kit 2 siringhe di A2 e A3 (1 siringa per ciascuna tinta) - 4 g ciascuna, 1 flacone Scotchbond™ Universal Adhesive - 5 ml, 10 Sof-Lex™ Spiral Finishing Wheels, 10 Sof-Lex™ Spiral Polishing Wheels, 1 mandrino RA	
Ricambio	Codice	Codice
Shade	Siringa	Capsula
	1 siringa - 4 g	20 capsule - 0,2 g
A1	4863A1	4864A1
A2	4863A2	4864A2
A3	4863A3	4864A3
B1	4863B1	4864B1
C2	4863C2	4864C2

Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative		
Ricambio	Codice	Codice
Shade	Siringa	Capsula
	2 siringhe - 4 g ciascuna	15 capsule - 0,2 g ciascuna
	20 punte di dispensazione	
A1	4862A1	4861A1
A2	4862A2	4861A2
A3	4862A3	4861A3
Universal	4862U	4861U
3740T	20 punte di dispensazione da 19 gauge	

3M™ ESPE™ Retraction Capsule	
56941	Refill Pack: 25 capsule
56942	Value Pack: 50 capsule

Elipar™ DeepCure-S LED Curing Light	
76975	1 manipolo in acciaio (cordless), base di ricarica (230V), batteria Li-ion, guida luce 10mm, schermo occhi

Elipar™ DeepCure-L LED Curing Light	
76973	1 manipolo leggero (batteria Li-ion integrata), alimentatore universale con 5 adattatori, guida luce 10mm, schermo occhi, 3 dischi per polimerizzazione



3M Oral Care
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 70351
www.3m.com/it

www.3MESPE.com

3M, ESPE, Elipar Filtek, RelyX, Scotchbond e Sof-Lex sono marchi registrati di 3M Company o 3M Deutschland GmbH. Usati in Canada dietro licenza. Tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà di altre aziende.

Si prega di riciclare. Stampato in Italia © 3M 2015. Tutti i diritti riservati.