

Renfert

making work easy

Easyclean MD

NOVITÀ

Apparecchio per la pulizia ad ultrasuoni conforme con MDR



L'apparecchio per la pulizia ad ultrasuoni Easyclean MD viene utilizzato per la performante pulizia o pulizia preliminare* di dispositivi medici come ad es. abutment e protesi e di strumenti (* non sostituisce il trattamento nel termodisinfettore). L'apparecchio conforme con MDR (Medical Device Regulation) è la soluzione ideale per chi desidera pulire dispositivi medici e apparecchiature molto semplicemente. L'uso di Easyclean MD è del tutto intuitivo; l'apparecchio offre diverse modalità di ultrasuoni e convince per il suo moderno design.

Vantaggi

- Come prodotto medico di classe I, Easyclean MD soddisfa i requisiti previsti dal regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745.
- Con cinque modalità di ultrasuoni preconfigurate si può attivare il programma giusto per ogni situazione.
- L'uso intuitivo consente di creare agevolmente programmi personalizzati.

Dettagli

- Pulizia performante.
- Intelligente funzione di feedback.
- Frequenza degli ultrasuoni di 37 kHz.
- Temperatura limite impostabile.

Suggerimento

Nonostante le diverse opzioni e la grande flessibilità, Easyclean MD è completamente „easy” da utilizzare. Il pannello di comando orientato all'utilizzatore integra un display ben leggibile che informa di importanti parametri, ad esempio la modalità di funzionamento, la durata o la temperatura. L'apparecchio segnala inoltre, ad esempio, il termine della pulizia o il raggiungimento della temperatura limite.



Applicazione esemplare: pulizia di dispositivi medici

Dati tecnici

Tensione di rete ammessa	220–240 V
Frequenza di rete ammessa	50/60 Hz
Potenza assorbita	320 W
Frequenza ultrasuoni	37 kHz
Potenza effettiva ultrasuoni	120 W
Potenza di riscaldamento	200 W
Dimensioni (L x A x P) (Dimensioni esterne dell'apparecchio)	305 x 230 x 170 mm
Peso	~3,6 kg
Volume (Volume max. della vaschetta)	2,7 l
Volume (Volume utile della vaschetta)	1,6 l

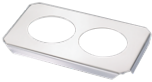
Referenze

Easyclean MD, 220–240 V	No. 18510000
-------------------------	--------------



Accessori

Easyclean MD

	GO 2011 speed	Indicato per la pulizia rapida e accurata di diversi strumenti e utensili in solo 50% del tempo rispetto ai solventi per gesso e alginate convenzionali.	2 l	No. 20120000
	Coperchio di plastica, grigio	Riscaldamento più rapido. Protezione dall'evaporazione e dalla polvere.	1 pezzo	No. 18500001
	Coperchio di acciaio con 2 fori	Supporto per il bicchiere di pulizia o per il bicchiere di plastica con coperchio.	1 pezzo	No. 18500002
	Cestello di acciaio inossidabile	Per il contenimento degli oggetti da pulire. Per proteggere il fondo della vaschetta vibrante.	1 pezzo	No. 18500003
	Cestello per immersione di acciaio inossidabile	Per oggetti piccoli e molto delicati. Impiego nel coperchio di acciaio inossidabile o nel bicchiere di pulizia.	1 pezzo	No. 18500004
	Vaschetta per acidi, in plastica	Per acidi e liquidi che non devono essere versati nella vaschetta di acciaio inossidabile.	1 pezzo	No. 18500005
	Bicchiere di pulizia	Per l'uso di altri liquidi detergenti. Impiego nel coperchio in acciaio inossidabile. 600 ml.	1 pezzo con coperchio e anello di gomma	No. 18500006
	Bicchiere di plastica con coperchio	Per oggetti relativamente piccoli e per lavorare con gli acidi. Adatto anche in combinazione con il coperchio di acciaio inossidabile.	1 pezzo	No. 18500007

