

# Futurabond® M+

ADESIVO UNIVERSALE

# Futurabond® M+

## OGNI GOCCIA UN PROFITTO

### Un adesivo adatto per ogni situazione:

Futurabond M+ unisce in un solo flacone tutto ciò che un dentista si aspetta da un adesivo e per cui di solito ci sarebbe bisogno di diversi preparati. Il materiale rende possibile un lavoro davvero universale, veloce e di alta qualità.

Rilevamenti scientifici hanno dimostrato eccellenti valori di adesione allo smalto e alla dentina di Futurabond M+ e perciò documentano un'alta affidabilità nel più vasto spettro di applicazione di un adesivo. Anche a materiali come sostrati di ossido di zirconio, l'adesivo universale monocomponente - Futurabond M+ dimostra valori ottimi. Indicazioni speciali

come per es. le riparazioni intraorali di restauri in ceramica integrale chiedevano prima sempre l'uso di un ulteriore primer. Ora non ce n'è più bisogno perché con Futurabond M+ si ottiene risultati molto migliori.

Oltre all'applicazione universale, Futurabond M+ dà la scelta libera del condizionamento del tessuto duro dentale con acido fosforico ad ogni dentista. Grazie alla nuova tecnologia di monomeri non è più possibile mordenzare la dentina eccessivamente e quindi si può evitare che il paziente soffra di sensibilità postoperatorie.

### Scelta libera della tecnica di mordenzatura:

- Automordenzatura ✓
- Mordenzatura selettiva ✓
- Mordenzatura totale ✓

Per restauri **diretti e indiretti** con qualunque composito a base di metacrilato fotopolimerizzabile, a doppia polimerizzazione o autopolimerizzante.\*

Grazie alla bagnabilità ottima, i tubuli dentinali **sono chiusi in modo sicuro** e perciò non compaiono sensibilità postoperatorie.

Per **riparazioni intraorali** di otturazioni, faccette in ceramica e restauri in ceramica integrale.

Applicabile in uno strato – lavoro facile in soli **35 secondi**.

Oltre **250 applicazioni** con un solo flacone




\* per compositi autopolimerizzabili e a doppia polimerizzazione in combinazione con Futurabond M+ DCA (attivatore per la doppia polimerizzazione)


# Futurabond® M+

FLESSIBILE E SICURO

## Restauro diretto

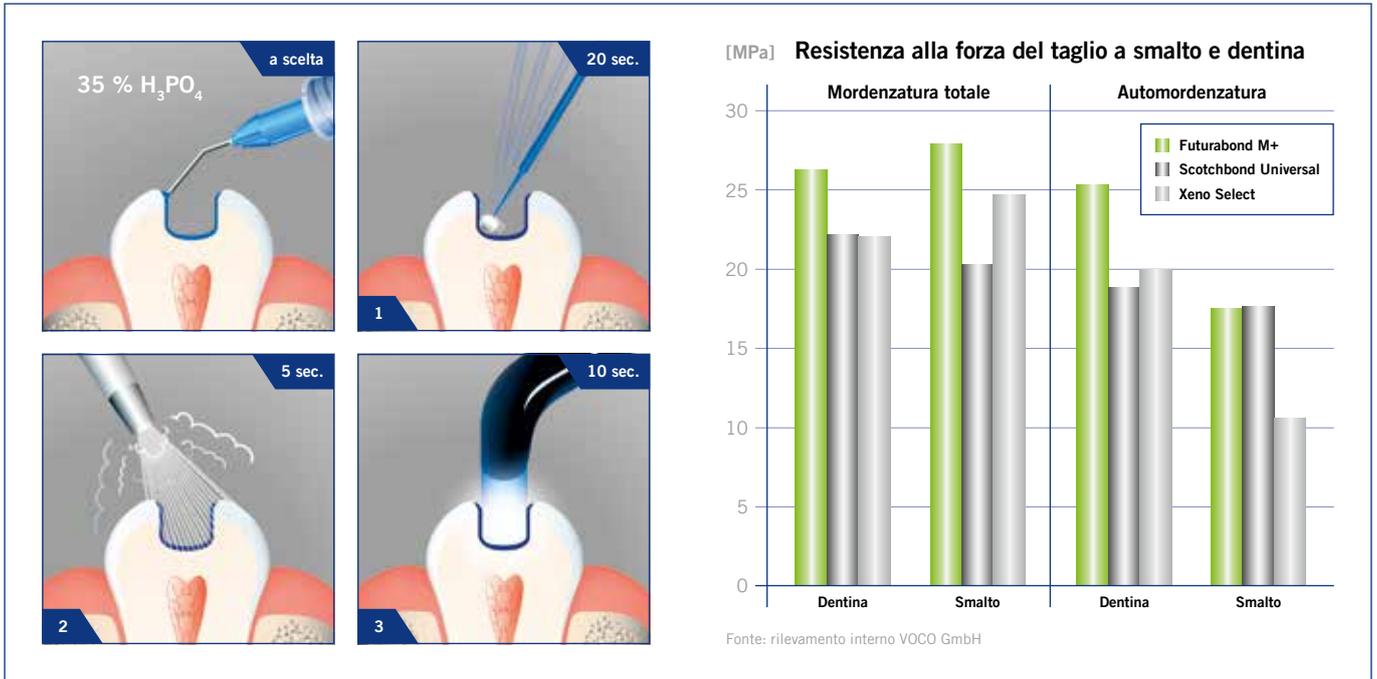

## Riparazione di restauri in ceramica integrale

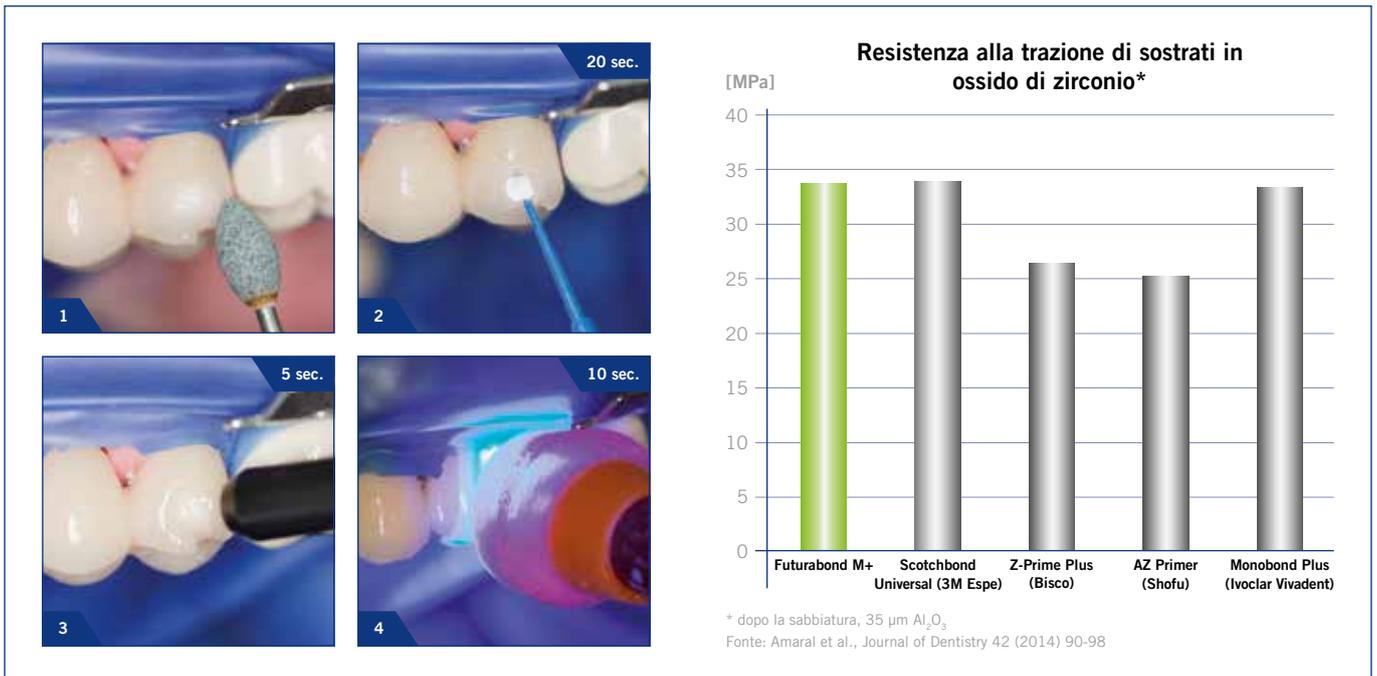

# Futurabond® M+

## ADESIVO UNIVERSALE

### Indicazioni

Restauri diretti e indiretti con qualunque composito, materiale per la ricostruzione di monconi, cemento adesivo a base di metacrilato fotopolimerizzabile

Riparazioni intraorali di otturazioni, faccette in ceramica e restauri in ceramica integrale senza aggiunta di primer

Trattamento di colletti dentali ipersensibili

Vernice protettiva per restauri in cemento vetroionomerico

Sigillo di cavità prima di restauri in amalgama o prima di cementazione provvisoria

### In combinazione con Futurabond® M+ DCA (attivatore per la doppia polimerizzazione)

Restauri diretti e indiretti con qualunque composito, materiale per la ricostruzione di monconi, cemento adesivo a base di metacrilato, a doppia polimerizzazione o autopolimerizzante

Cementazione di perni radicolari con cementi adesivi a doppia polimerizzazione o autopolimerizzanti

### Vantaggi

- Applicabile con o senza mordenzatura con acido fosforico
- Adatto perfettamente per restauri diretti e indiretti
- Adesione sicura su diversi materiali, per esempio metallo, ossido di zirconio, ossido di alluminio e ceramica di silicato senza l'uso di un ulteriore primer
- Applicabile in uno strato – lavoro facile in soli 35 secondi

### Confezionamento

REF 1515	Flacone 5 ml, accessori
REF 1516	Flacone 3 × 5 ml
REF 1518	Futurabond M+ DCA – flacone 2 ml
REF 2246	Endo Tim, pennellini per applicazione, da usare nel canale radicolare, 50 pz.
REF 2247	Single Tim, pennellini per applicazione, 100 pz.
REF 2315	Blocco di miscelazione, 20 pz.



VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germania  
  
Tel.: +49 (0) 4721-719-0  
Fax: +49 (0) 4721-719-140  
  
info@voco.com  
www.voco.it

Disponibile presso: