

IPS e.max[®] Ceram Selection



IPS e.max® Ceram Selection

Le nuove masse smalto ed Effect di IPS e.max® Ceram Selection entusiasmano con colori brillanti ed impressionanti caratteristiche foto-ottiche.

IPS e.max Ceram Selection comprende dodici masse particolari per maggiore creatività ed individualità nella tecnica di stratificazione. Si utilizzano in combinazione alle masse IPS e.max Ceram e facilitano la caratterizzazione individuale, favorendo la realizzazione di restauri altamente estetici e di effetto naturale.

I rinomati Odontotecnici Oliver Brix (Germania), August Bruguera (Spagna) e Gérald Ubassy (Francia) hanno dato la loro impronta determinante al concetto dell'IPS e.max Ceram Selection. Le masse dalla speciale colorazione ed il loro utilizzo, sono il risultato di pluriennale lavoro di successo con IPS e.max Ceram.

I dodici colori sono suddivisi in tre gruppi:

- Special Enamel – masse smalto colorate
- Light Reflector – masse Effect che riflettono la luce
- Light Absorber – masse Effect che assorbono la luce



Made to
create nature

Nate dalla passione
e dall'esperienza ...



... con l'obiettivo, di copiare
perfettamente la natura ...



... e con l'esigenza,
di condividere queste conoscenze.



Special Enamel

Le sei masse **Special Enamel** sono masse smalto di diversa colorazione con una traslucenza simile allo smalto.



Light Reflector

Le tre masse **Light Reflector**
sono masse Effect che riflettono
la luce.



cream



salmon



silk

Light Absorber

Le tre masse **Light Absorber**
sono masse Effect che assorbono
la luce.




fog



lavender



taupe

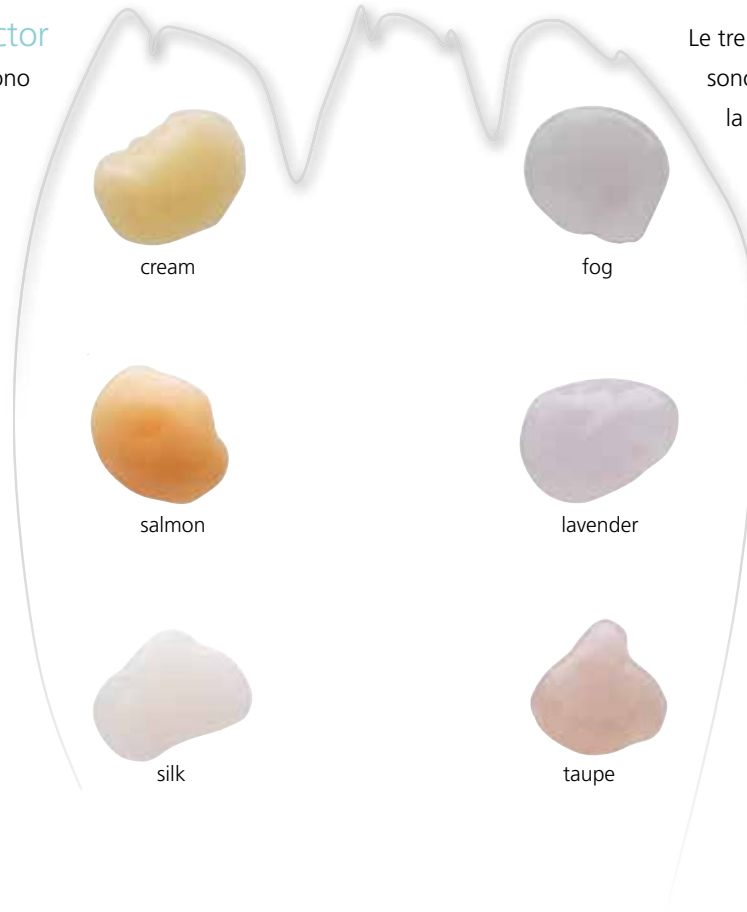

Guida alla selezione del materiale

Colore e traslucenza

(Piastrina cromatica con 1 mm di spessore)

Gruppo

Special Enamel

aqua

Massa smalto intensiva a supporto di
lungo i margini incisali.

Esempio del posizionamento



Descrizione prodotto

dell'effetto di traslucenza bluastro



Campo di impiego



► Area dello smalto



► Area intermedia



► Area dello smalto
► Area intermedia



► Area intermedia
► Area dentinale

Effetto naturale



Special Enamel

aqua

Massa smalto intensiva a supporto dell'effetto di traslucenza bluastro lungo i margini incisali.



Special Enamel

citrine

Massa smalto giallastra per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto.



Special Enamel

honey


Massa smalto color miele per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto.



Special Enamel

apricot

Massa smalto color albicocca per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto.

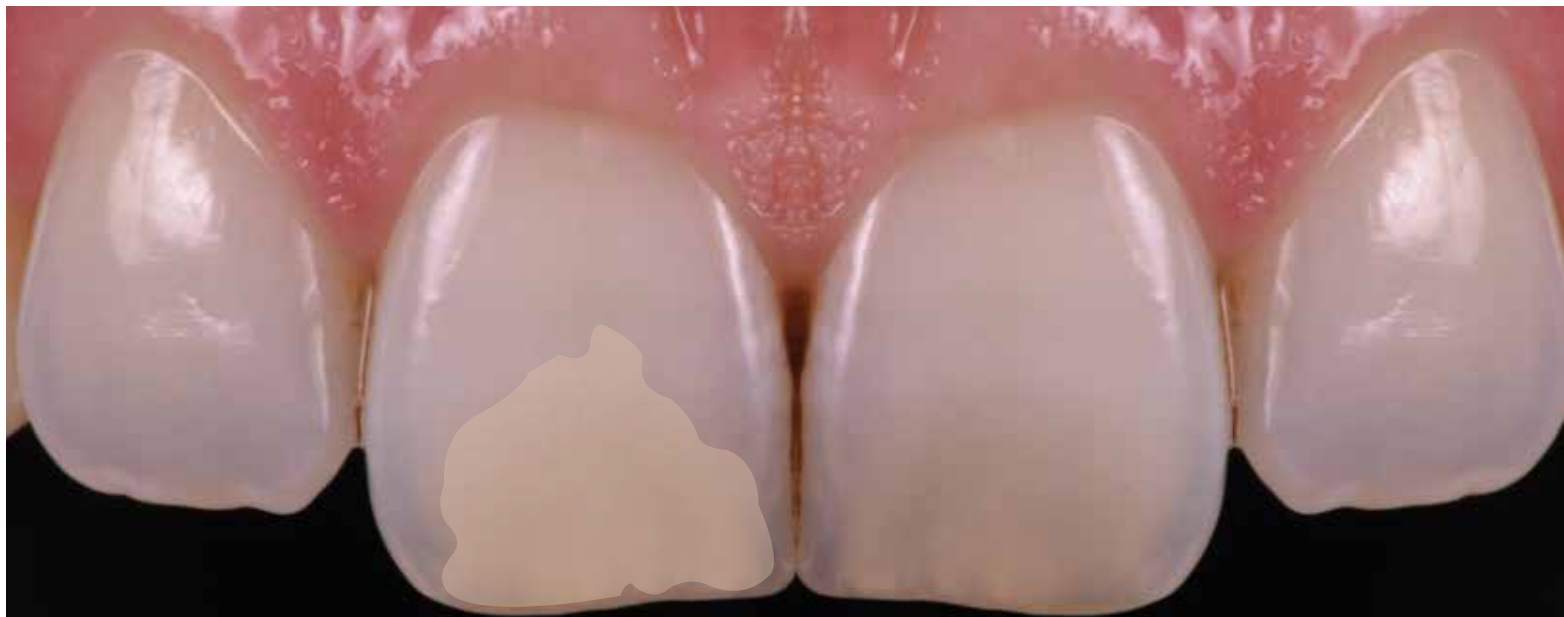

Special Enamel

quartz


Massa smalto grigio caldo per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto.



Special Enamel

diamond


Smalto universale di colore neutro per i settori anteriori.

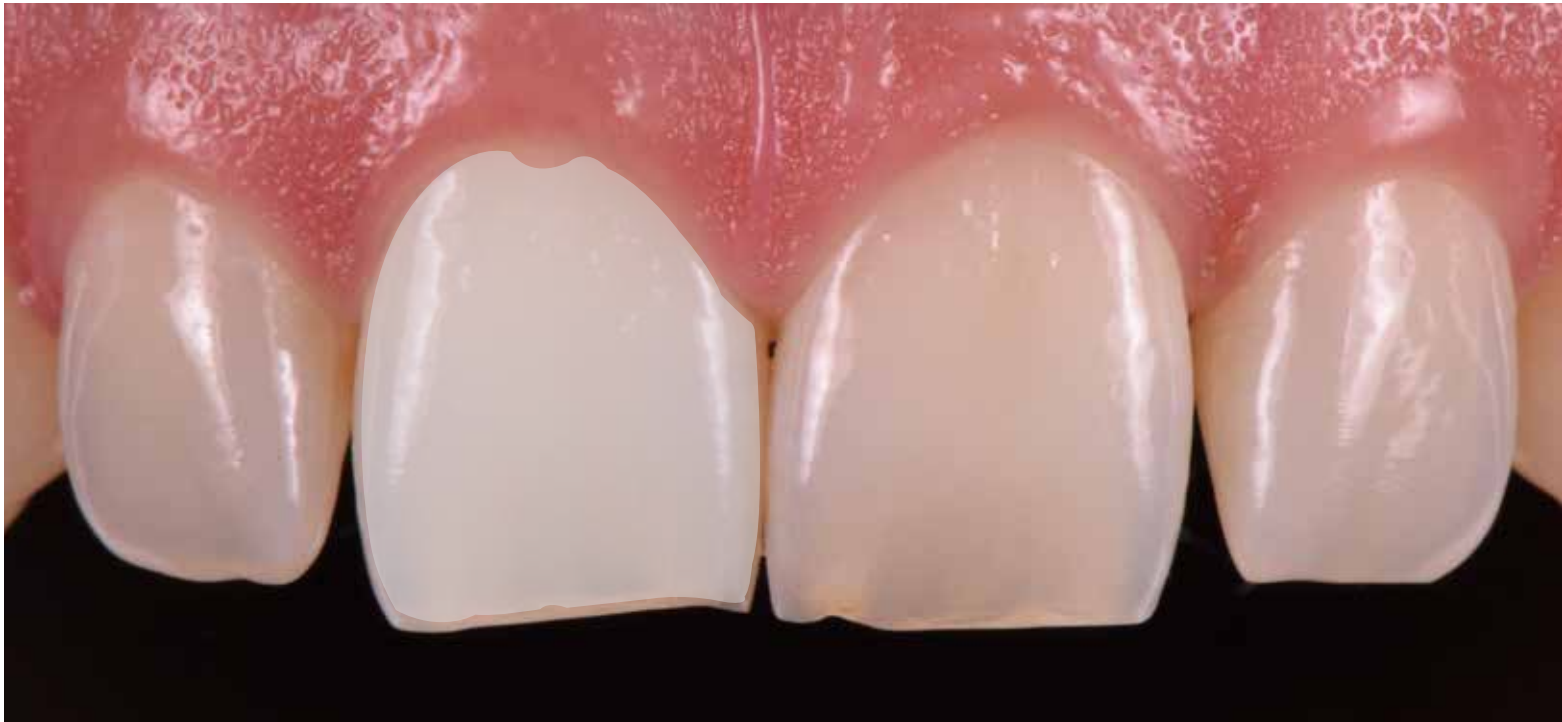

Light Reflector

cream

Massa Effect di colore crema per imitare le zone cromaticamente riflettenti nel terzo cervicale e nel terzo incisale.


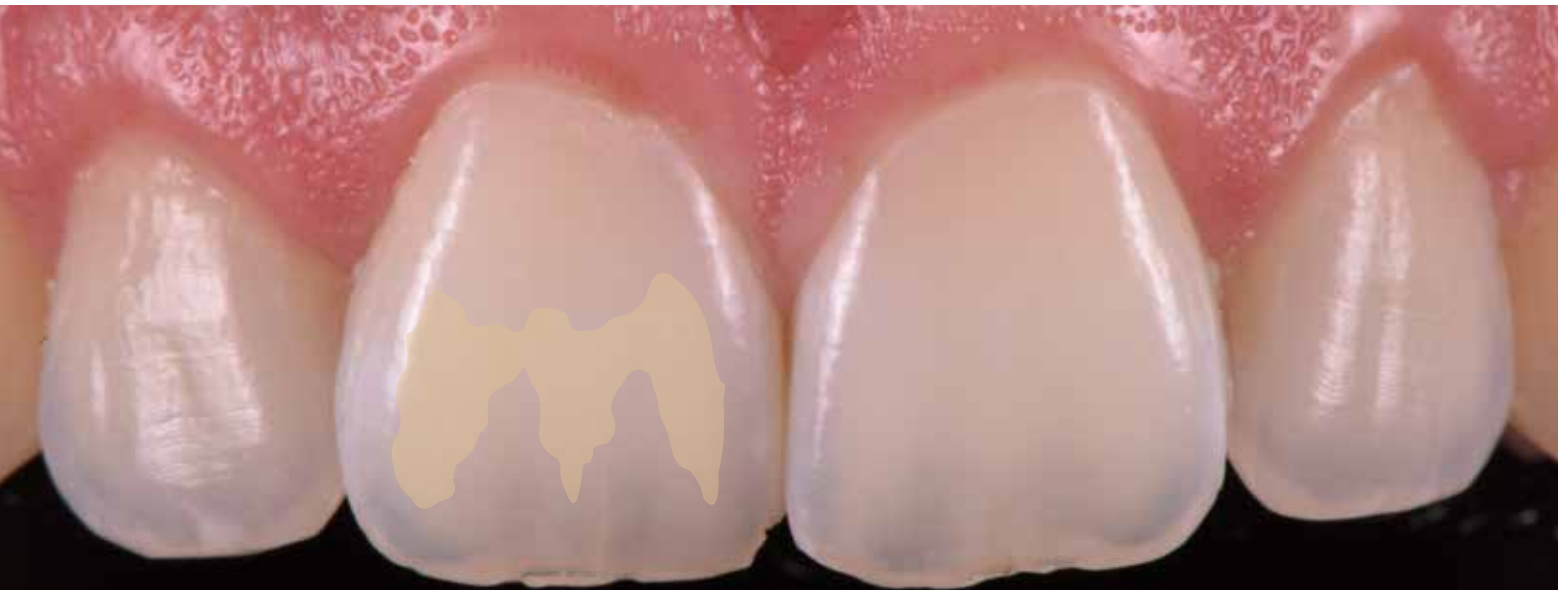




Light Reflector

salmon

Massa Effect di colore salmone per imitare le zone cromaticamente riflettenti nel terzo cervicale e nel terzo incisale.

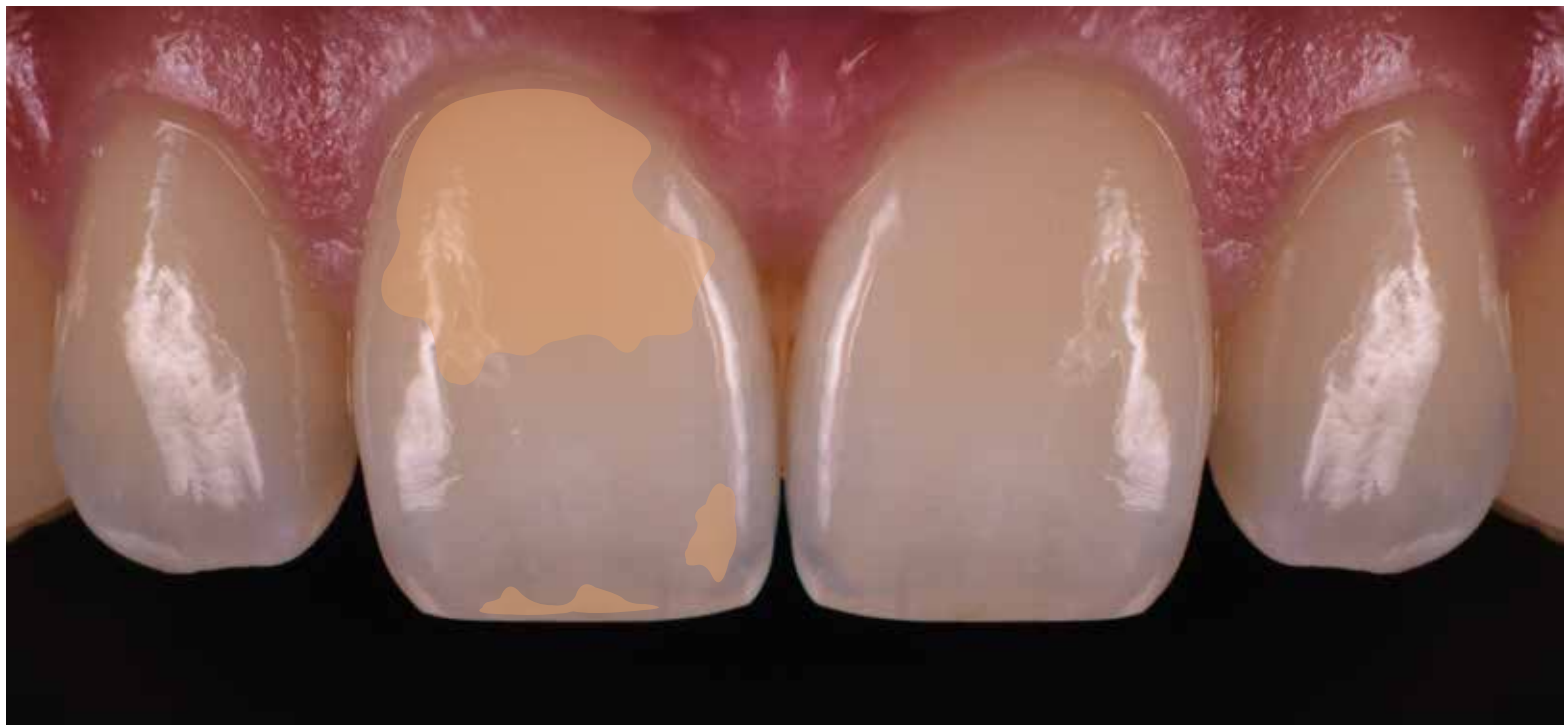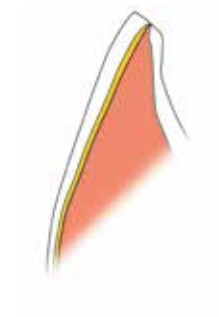

Light Reflector

silk

Massa Effect biancastra per aumentare la luminosità nell'area dello smalto.





Light Absorber

fog

Massa Effect grigiastra per ridurre la luminosità nell'area dello smalto.



Light Absorber

lavender

Massa Effect di colore violetto per la modellazione di zone di assorbimento nel terzo incisale e cervicale e nelle zone prossimali.



Light Absorber

taupe

Massa Effect di colore violetto-marrone per la modellazione di zone di assorbimento nel terzo incisale e cervicale e nelle zone prossimali.



Confezionamenti

IPS e.max® Ceram Selection Kit

- IPS e.max Ceram Special Enamel, 5 g, 1 x
colori: aqua, citrine, honey, apricot, quartz,
diamond
- IPS e.max Ceram Light Reflector, 5 g, 1 x
colori: cream, salmon, silk
- IPS e.max Ceram Light Absorber, 5 g, 1 x
colori: fog, lavender, taupe



Ricambi



**IPS e.max Ceram
Special Enamel, 1x 5 g**
Colori: aqua, citrine, honey,
apricot, quartz, diamond



**IPS e.max Ceram
Light Reflector, 1x 5 g**
Colori: cream, salmon, silk




**IPS e.max Ceram
Light Absorber, 1x 5 g**
Colori: fog, lavender, taupe







IPS e.max® Ceram Selection

Special Enamel

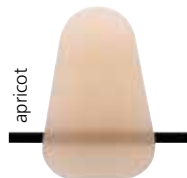

Light Reflector

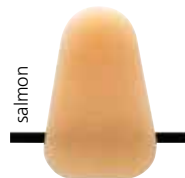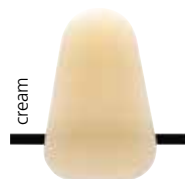

Light Absorber

